

## Garantía Limitada de por Vida

Calidad es el sello de todos de los productos de Lumex®. De confianza por profesionales de cuidado de salud y usuarios por más de 50 años, Lumex tiene una línea completa de asistencia para pacientes y asientos especializada de asistencia sanitaria.

Los productos de Lumex son diseñados y hechos a estándares precisos y son revisados cuidadosamente antes de envió. La Garantía Limitada de por Vida es un expresión de nuestro confianza en los materiales y factura de nuestros productos. Somos dedicados a proveer productos que pueden dar años de servicio fiable a nuestros clientes.

GF Health Products, Inc. garantiza las partes específicos de estos modelos de Lumex escritos en el forro de este "hangtag" para la vida del producto sobre ser libre de defectos en materiales y factura cuando usado por el propósito entendido, sobre condiciones normales, y pródigo que el producto reciba cuidado apropiado.

Partes cubiertas debajo de esta garantía incluye: marco, soldadura, tornillos, componentes de posicionar el marco. Artículos específicos "excluidos" de esta garantía de cual quiere tipo: "TODAS" otras partes no mencionados específicamente arriba. La garantía no se extenderá a componentes no durables como accesorios punta, cuales son sujetos a desgaste normal y requieren remplace periódico. Esta garantía no incluye cargos de labor incurridos con instalación de partes de reemplazo o cargos de transporte o carga asociados al fabricante.

Si hay un defecto en el producto que se cubra por la garantía, nosotros, a nuestra opción, podemos reparar o reemplazar el producto.

Las garantías que figuran en este documento contiene todas las declaraciones y garantías en relación con la materia objeto de este documento, y sustituyen todas las negociaciones previas, acuerdos y entendimientos con respecto a la misma. El receptor del presente documento reconoce y declara que no ha basado en ninguna declaración, afirmación, garantía, contrato de garantía u otra promesa, excepto los establecidos en este documento.

Para información adicional de este producto de Lumex o esta garantía, por favor de llamar a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.

# LUMEX®

A Graham-Field Brand

- Soft, contoured foam handle provides a comfortable, secure handgrip
- Easy height adjustment from 31" – 40" in 1" increments with locking mechanism for added security
- Attractive, designer finish
- 250 lb maximum weight capacity
- Lifetime Limited Warranty

- *Agarre suave y contorneado provee un agarre de mano comfortable y seguro*
- *Ajustamiento de altura fácil de 31" – 40" en incrementos de 1" con mecanismo de cerradura para seguridad adicional*
- *Acabado de diseño atractivo*
- *Capacidad maximo de peso de 250 lb*
- *Garantía Limitada de por Vida*

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

Para la información más último sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

© 2012, GF Health Products, Inc.  
2935 Northeast Parkway, Atlanta, Georgia 30360  
Made in Taiwan [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

GF1200001RevA12

# LUMEX®

A Graham-Field Brand

## Stylus Offset Canes (5950S series)

*Baston de Moda con Agarre Desplazado*



### User Instructions and Warranty Information

Important: Read Before Use

*Instrucciones e Informacion de la Garantia*  
Importante: Lea Antes de Uso



## Instructions for Use – Please Read all Instructions Before Use.

This cane is designed for users with recommended heights ranging from 4' 10" to 6' 4". Please consult a healthcare professional for the proper height adjustment and usage.


### Adjusting Cane Height

1. Loosen locking collet by twisting counter-clockwise.
2. Adjust cane height: Depress push button and slide lower section upward or downward to desired height.

*NOTE: An audible "click" will be heard when push button securely protrudes through the adjustment hole.*

3. Secure locking collet by turning clockwise until tight.

5950SB	Blue	6/cs
5950SBK	Black	6/cs
5950SR	Red	6/cs
5950SS	Silver	6/cs

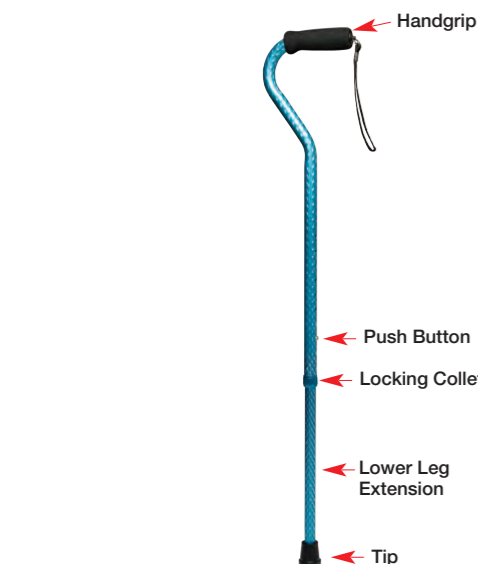

## Safety Guidelines – Please Read Before Use

1. DO NOT install or use this equipment without first reading and understanding these instructions. This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.
2. Each individual should always consult with their physician or therapist to determine proper adjustment and usage.
3. This product has a maximum user weight limitation of 250 lb. The canes are NOT designed to support the total weight of individuals.
4. GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
5. Before use, ensure cane tip is properly seated and straight. Check rubber tip for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace rubber tip immediately.
6. Single push button height adjustment MUST be fully engaged and protruding through height adjustment hole on cane to ensure a positive lock. ALWAYS test to see that cane handle is properly and securely locked in place BEFORE using.
7. Make sure locking collet is securely tightened at all times.
8. Always use caution when using this product on wet or slippery surfaces.
9. If components are damaged or missing, contact your dealer immediately. DO NOT use substitute parts.
10. Before use, inspect cane and ensure that it is locked securely in position. Inspect weekly.
11. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your dealer for repair and/or appropriate replacement parts.

### Maintenance

- Wipe cane weekly with a damp cloth.
- Grips may be cleaned with mild soap or detergent.
- DO NOT use organic solvents, such as acetone, which may damage grip.
- Never use abrasive cleaners or scouring pads on any part of the cane.
- Check locking collet weekly for tightness.
- Replace cane tip as needed.
- To guarantee the best service from your cane, always specify Lumex replacement parts, available from your Graham-Field Distributor.

## Instrucciones Para Uso – Lea y Entiende Todas Las Instrucciones Antes de Uso.

Este bastón es diseñado para usuarios con alturas recomendados de 4' 10" a 6' 4". Por favor de consultar con un profesional de cuidado de salud para ajuste de altura y uso apropiado.


### Ajustando la Altura del Bastón

1. Afloja la cerradura retorsando en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Ajuste la altura del bastón. Apreté el botón y deslice la sección inferior arriba y abajo a la altura deseado.

*NOTA: Un "clic" audible se oye cuando el botón se sobresale seguramente por el hueco de ajustamiento.*

3. Asegura la cerradura retorsando en el sentido de las agujas del reloj hasta que este ajustado.

5950SB	Blue	6/cs
5950SBK	Black	6/cs
5950SR	Red	6/cs
5950SS	Silver	6/cs

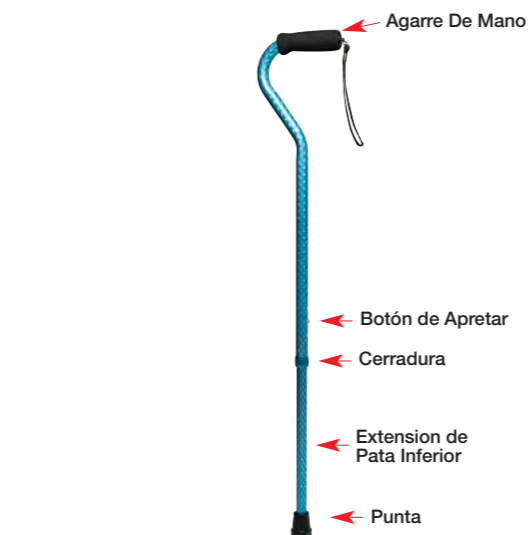

## Lifetime Limited Warranty

Quality is the hallmark of all Lumex® products. Trusted by healthcare professionals and end-users for over 50 years, Lumex features a full line of patient aids and specialty healthcare seating.

Lumex products are designed and built to precise standards and are carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products. We are dedicated to providing products that will give our customers years of dependable service.

GF Health Products, Inc. hereby warrants specific parts of the Lumex models listed on the cover of this hangtag for the lifetime of the product against defective workmanship and/or material defects when used for the purpose intended, under normal conditions, and provided the product receives proper care.

Parts covered under the lifetime warranty include: frame, welding, screws, and frame locking components. Specific items "excluded" from this warranty of any kind are: "ALL" other parts not specifically listed above. The warranty does not extend to non-durable components, such as tips, which are subject to normal wear and require periodic replacement. The warranty does not include any labor charges incurred in replacement part(s) installation or any associated freight or shipping charges to the manufacturer.

Should a product defect that is covered by this warranty arise, we will, at our option, repair or replace the product.

The warranties contained herein contain all the representations and warranties with respect to the subject matter of this document, and supersede all prior negotiations, agreements and understandings with respect thereto. The recipient of this document hereby acknowledges and represents that it has not relied on any representation, assertion, guarantee, warranty, collateral contract or other assurance, except those set out in this document.

For additional information on this Lumex product or this warranty, please contact an authorized GF Health Products, Inc. Distributor.

## Directriz de Seguridad – Por Favor De Leer Antes de Uso

1. NO DEBE instalar o usar este equipo sin leer y entender estas instrucciones. Este producto no debe ser usado sin instrucciones de su profesional de cuidado de salud.
2. Cada individual debe consultar con su medico o terapeuta para determinar ajuste y uso apropiado.
3. Este producto tiene una limitación de peso máximo de 250 lb. Estos bastones NO SON designados para soportar el peso total de individuales.
4. GF Health Products, Inc. no asume responsabilidad para cual quiera daño y herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.
5. Antes de uso, asegure que la punta del bastón esta puesto correctamente. Cheque la punta de goma para rasgones, desgarrones o desgaste. Si algunas de estas condiciones existen, remplace la punta de goma inmediatamente.
6. El único botón de ajuste de altura TIENE que sobresalir por el hueco de ajustamiento de altura en el bastón para asegurar que esta asegurado. SIEMPRE prueba para ver si la manga y la altura esta n onto esta cerrado correctamente ANTES de usar.
7. Asegure que la cerradura esta laqueado apretado seguramente.
8. Siempre usa caución cuando usando este producto en superficies mojado o resbaloso.
9. Si componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO USE partes substitutos.
10. Antes de uso examine el baston y asegura que esta cerrado y seguro en posición. Examine seminal.
11. Si algún componente no esta funcionando correctamente o se paréese con desgaste, llame a su distribuidor para reparar y reemplace de partes.

### Mantenimiento

- Pásale con una toalla húmedo albastón seminal.
- Agarres pueden ser limpiados con jabón o detergente suave.
- NO USE solvente orgánicos como acetona, que puede dañar el agarre.
- Nunca debe usar limpiadores abrasivos o estropajos en cual quiera parte del bastón.
- Cheque la cerradura seminal para rigidez.
- Reemplace la punta si es necesario.
- Para garantizar el mejor servicio de su bastón, siempre debe especificar partes reemplazaros de Lumex, disponibles por su distribuidor de Graham-Field.