

## Garantía Limitada

La información de garantía siguiente es un SUMARIO de la Garantía del Producto completa provisto de GF Health Products, Inc. Para la garantía completa, por favor de visitar a la página de web [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

GF Health Products, Inc. (“GF”) garantiza al comprador original o arrendatario (cual quiera es el “Cliente”) solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto pródigo a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la estructura tiene garantía por cinco (5) años y los componentes de uso normal como puntas, ruedas y manijas tienen garantía por tres (3) meses. El periodo de garantía se comencia en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

### OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTIA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando (678) 291-3207, mandando fax a (770)-368-2386 o por email a [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Direcciones especificos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

### EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF será responsable por lo siguiente: 1) Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; 2) Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y 3) Cargos de Labor o transporte. Otras exclusiones se aplican.

### GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

Para la garantía completa por este producto, por favor de visitar a la página [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

## Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use.

### Setup


- Remove frame, commode platform and back support from box. Unwrap all packaging materials.
- Commode platform is already attached to frame, as shown below; ensure that all sides of platform are secured to frame.
- The commode comes in its lowest position. Adjusting to desired height is recommended before use.

### Arm Adjustment

- Drop Armrest:** to drop the armrest, push the release lever inwards to release the armrest. This releases the armrest allowing for the transfer on and off the commode.
- Raise Armrest:** to raise the armrest, lift the armrest to the upright position, ensuring that the push button protrudes fully from locking hole.

### Adjusting Leg Height

- Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button is fully engaged in the desired hole.  
**NOTE:** An audible “click” will be heard.
- Repeat for other 3 legs.  
**CAUTION:** Ensure that all four commode legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.

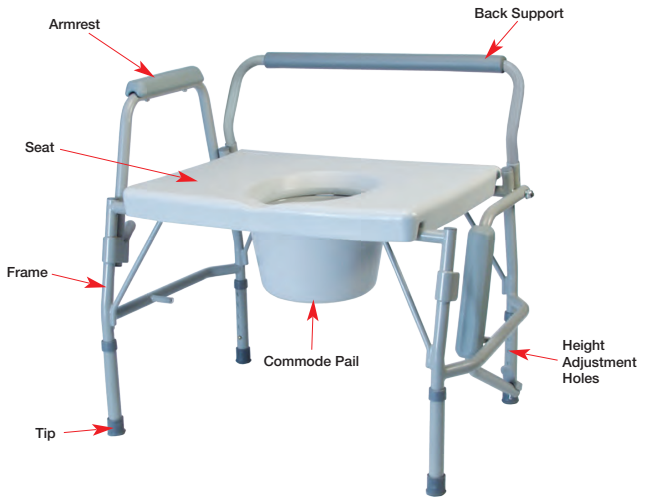

# LUMEX®

### Features

- Arms drop independently below seat level for lateral transfers (6438A only)
- Arms automatically lock in raised position
- Extra wide platform seat is comfortable for long periods of sitting
- Welded steel construction and extra wide base provide added stability
- Cushioned armrests enhance user comfort
- Comes complete with commode pail, cover and splash guard
- Removable back bar facilitates use as a bedside commode, raised toilet seat or toilet safety frame
- 6438A – 600lb maximum weight capacity EVENLY DISTRIBUTED 7446A-2 – 400lb maximum weight capacity EVENLY DISTRIBUTED
- Designed to meet the requirements of HCPCS code: E0168

### Características

- Apoyabrazos se bajan independiente abajo del nivel del asiento para transferir lateral con seguridad (solamente 6438A)
- Apoyabrazos se cierran automáticamente en la posición subida
- Asiento plataforma mas ancho es comfortable para sentarse por periodos largos
- Construcción de acero aumenta esfuerzo y estabilidad
- Apoyabrazos acolchonados aumentan comodidad de usuario
- Viene completa con el balde de inodoro, tapa y salpicadera
- Respaldo desmontable facilita uso como inodoro al lado de cama, asiento elevado o marco de inodoro para seguridad.
- 6438A – Capacidad de peso máximo de 600 lb DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE 7446A-2 – Capacidad de peso máximo de 400 lb DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
- Diseñado a reunir los requisitos de código de HCPCS: E0168

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantias, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

© 2014, GF Health Products, Inc.,  
2935 Northeast Parkway, Atlanta, Georgia 30360  
Made in China. [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

GF0900148RevB14

## Maintenance

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## Safety Guidelines – Please Read Before Use

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

## WARNING

**WARNING:** DO NOT use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

**WARNING:** Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the commode.

**WARNING:** Item 6438A has a maximum weight capacity of 600 lb. EVENLY DISTRIBUTED  
Item 7446A-2 has a maximum weight capacity of 400 lb. EVENLY DISTRIBUTED

**WARNING:** GF Health Products Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly, or use of this product.

**WARNING:** Leg extensions with rubber tips MUST be in contact with the floor at all times.

**WARNING:** Ensure that the push buttons fully protrude through the same height adjustment hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in position and that an even height adjustment is achieved.

**WARNING:** Make sure that all attaching hardware, screws, nuts and/or bolts are tight at all times.

**WARNING:** Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks or wear or if they are missing. Replace them IMMEDIATELY if any of these conditions exist.

**WARNING:** The commode seat MUST be installed before sitting on the commode.

**WARNING:** Notice for California Customers  
**California Proposition 65 WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.

**WARNING:** If components are damaged or missing, contact your GF Health Products Inc. distributor immediately.

# LUMEX®

## Imperial Collection Commode

*Colección Imperial de Inodoro*  
Items 6438A, 7446A-2



### User Instructions and Warranty Information

Important: Read Before Use

*Instrucciones e Informacion de la Garantia*  
Importante: Lea Antes de Uso



## Instrucciones Para Uso – Lea y Entiende Todas Las Instrucciones Antes de Uso.

### Montaje


- Saque el marco, el plataforma del inodoro y el soporte de espalda del cartón. Desenvuelve todo los materiales de empaque.
- Plataforma del inodoro viene ajunto al marco, como demostrado abajo; asegure que todos los lados del plataforma son asegurados al marco.
- El inodoro viene en su posición mas baja. Ajustando la altura deseado es recomendado antes de uso.

### Ajustamiento de Apoyabrazo

- Bajar Apoyabrazo:** para bajar el apoyabrazo empuje la palanca hacia adentro para soltar el apoyabrazo. Esto suelta el apoyabrazo para permitir transferir sobre y fuera del inodoro.
- Subir Apoyabrazo:** para subir el apoyabrazo, levanta el apoyabrazo en su posición vertical, asegurando que el botón de apretar sobresale completamente por el hueco.

### Ajustando la Altura del Inodoro

- Apriete el botón de ajustamiento de altura y deslice la parta inferior de la pata hacia arriba y abajo hasta que el botón de ajustamiento esta asegurado en el hueco deseado  
**Nota:** Se oye un “clic” cuando esta puesto.
- Repita para las otras 3 patas.  
**CAUCION:** Asegure que todas cuatros patas están ajustados a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento sobresalen por los huecos de ajustamiento antes de uso.

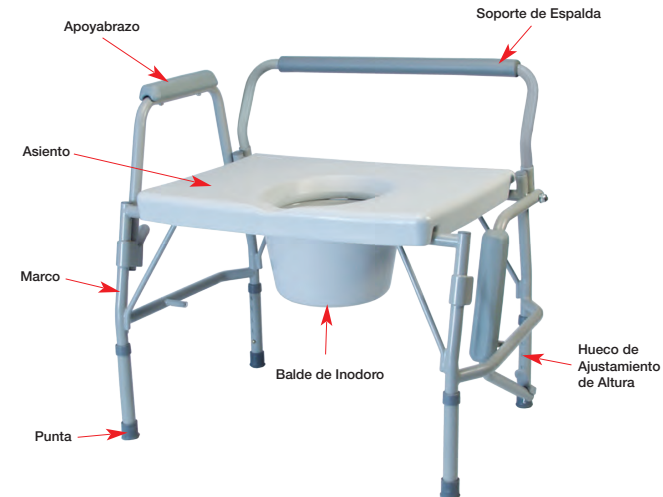

## Limited Warranty

The following warranty information is a SUMMARY of the complete Product Warranty provided by GF Health Products, Inc. For the complete warranty, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the “Customer”) only, that it will replace or repair components, at GF’s sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for five (5) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

### OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling (678) 291-3207, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

### EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

**ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER**  
THIS WARRANTY IS GF’S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de utilizar.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro.
- Cheque seminalmente que los tornillos y perillas están apretados para asegurar que el inodoro esta bueno para utilizar.
- Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplazo de Lumex si son disponible por su distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visitenos online en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## Directriz de Seguridad – Por Favor De Leer Antes de Uso

NOTA: Examine to das las partes por daño en transporte. Si hay daño en transporte, NO UTILICE. Llame a su empresa de transporte para instrucciones.

## ADVERTENCIAS

**ADVERTENCIA:** NO DEBE UTILIZAR este producto sin primero leer y entender estas instrucciones y cual quiere otro material como el manual de usuario, manual de servicio hoja de instrucción suministrado con este producto. Si no puedes entender las advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional de cuidio de salud, distribuidor o personal técnica antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.

**ADVERTENCIA:** Usuarios con capacidades fisicos puede ser supervisados o asistidos cuando utilizar el inodoro.

**ADVERTENCIA:** 6438A – Capacidad de peso máximo de 600 lb DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE  
7446A-2 – Capacidad de peso máximo de 400 lb DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE

**ADVERTENCIA:** GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.

**ADVERTENCIA:** Extensiones de patas con puntas de goma TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo.

**ADVERTENCIA:** Asegure que los botones de apretar sobresalen completamente por los mismos huecos de ajustamiento de altura de cada extensión de pata. Esto asegura que las extensiones de pata están asegurados en posición y que el ajustamiento de altura esta uniforme.

**ADVERTENCIA:** Asegure que la ferreteria, tornillos y perillos están apretados todo el tiempo.

**ADVERTENCIA:** Examine las puntas de goma en las extensiones de patas para grietas o desgasto o si faltan. Reemplace IMMEDIAMENTE si estas condiciones existen.

**ADVERTENCIA:** El asiento del inodoro TIENEN que estar instalado antes de sentarse en el inodoro.

**ADVERTENCIA:** Aviso a Clientes de California  
**ADVERTENCIA** Proposicion 65 de California: Este producto contiene una cemica que el Estado de California de causar cancer y herida reproductiva y de desarrollo.

**ADVERTENCIA:** Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. inmediatamente.