

# LUMEX®

by graham-field

## **Silver Collection Low Profile Bariatric Quad Cane**

***Bastón con Base Cuadrada Bariatrica de Perfil  
Bajo de la Colección de Plata***

Item 6130



graham  
field

QTY. 1 EA

## SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE


1. This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.
2. This product has a maximum user weight limitation of 500 lb. - **EVENLY DISTRIBUTED**. The product is **NOT** designed to support the total weight of individuals.
3. GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
4. If components are damaged or missing, contact your distributor immediately. **DO NOT** use substitute parts.
5. Before use, ensure tip is properly seated and straight. Check rubber tip for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace rubber tip immediately.
6. Always use caution when using this product on wet or slippery surfaces.
7. Inspect product weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
8. Single push button height adjustment **MUST** be fully engaged and protruding through height adjustment hole on cane to ensure a positive lock. **ALWAYS** test to see that cane handle is properly and securely locked in place **BEFORE** using.
9. Make sure locking collet is securely tightened at all times.
10. When using a Quad cane, the cane should be placed on a level walking surface with all four legs in contact with the surface. Use of cane in a fashion other than this can lead to eventual cane damage and/or personal injury.

## GENERAL WARNING

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. **DO NOT** substitute parts.

## GENERAL WARNING (CONT.)

- Before use, ensure that all assembled parts are secure and all hardware is tightened.
- Care should be taken to ensure that all height adjustments are secure.
- **ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag of this product.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-  
[www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).

## INSTALLATION WARNINGS

- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- Inspect product weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
- **ALWAYS** test to see that the product is properly secured in open position **BEFORE** use and ensure all hardware is securely tightened.

## MAINTENANCE

- Wipe product weekly with a damp cloth.
- Grips may be cleaned with mild soap or detergent. **DO NOT** use organic solvents, such as acetone, which may damage grip.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check locking collet weekly for tightness.
- Replace cane tip as needed.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## INSTRUCTIONS FOR USE

*Please Read all Instructions Before Use.*

This cane is designed for users with recommended heights ranging from 4' 10" to 6' 4". Please consult a healthcare professional for the proper height adjustment and usage.

## HEIGHT ADJUSTMENT

1. Loosen locking collet by twisting counter-clockwise.
2. Adjust cane height: Depress push button and slide lower section upward or downward to desired height..

**NOTE:** *An audible "click" will be heard when push button securely protrudes through the adjustment hole.*

3. Secure locking collet by turning clockwise until tight.

## LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the “Customer”) only, that it will replace or repair components, at GF’s sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for three (3) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

## OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling **(678) 291-3207**, sending a fax request to **(770) 368-2386** or by e-mailing a request to **cs@grahamfield.com**. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.


## EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: **1)** Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; **2)** Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and **3)** Labor or shipping charges. Other exclusions apply. Additional limitations relative to this warranty may be found on [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com) Terms and Conditions page. State laws governing the warranty of this product may provide more expanded rights than those set forth in this warranty.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF’S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

Handgrip  
*Agarre De Mano*

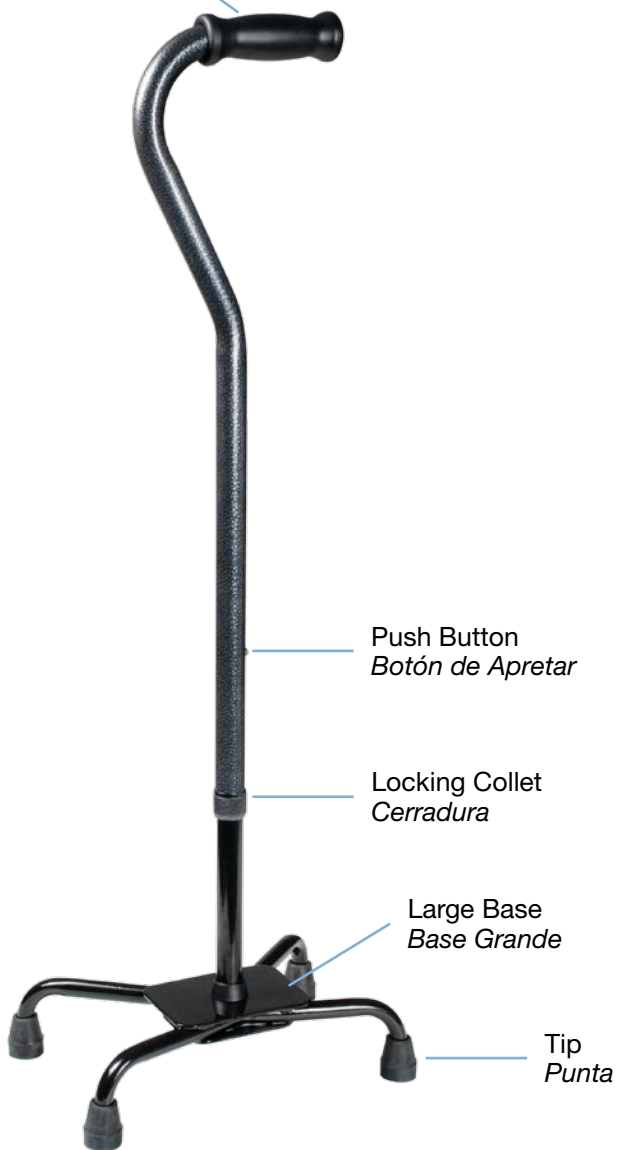

Push Button  
*Botón de Apretar*

Locking Collet  
*Cerradura*

Large Base  
*Base Grande*

Tip  
*Punta*

## DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

1. Este producto no debe ser usado sin instrucciones apropiadas de su profesional de cuidado de salud.
2. Este producto tiene una capacidad de peso máximo de usuario de 500 lb. - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE. Estos bastones NO SON designados para soportar el peso total de individuales.
3. GF Health Products, Inc. no asume ningún responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.
4. Si componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO debe usar partes substitutos.
5. Antes de usar, asegúrese de que la punta esté correctamente asentada y recta. Revise la punta de goma en busca de rasgaduras, roturas, grietas o desgaste. Si existe alguna de estas condiciones, reemplace la punta de goma de inmediato.
6. Siempre tenga cuidado al usar este producto en superficies mojadas o resbaladizas.
7. Examine el producto seminales para función normal y gasto. Si algún componente no esta funcionando correctamente y se ve desgaste, llame a su distribuidor de Lumex para reparar y partes de reemplazo.
8. El único botón de ajuste de altura TIENE que sobresalir por el hueco de ajustamiento de altura en el bastón para asegurar que esta asegurado. SIEMPRE prueba para ver si la manga y la altura esta n onto esta cerrado correctamente ANTESde usar.
9. Asegúrese de que el collar de bloqueo esté bien apretado en todo momento
10. Cuando estés usando un bastón con base cuadrada, el bastón debe estar colocado en una superficie de caminar con las cuatro patas en contacto con la superficie. Uso del bastón de otra manera puede causar daño al bastón y/o herida persona.

## ADVERTENCIAS

- **NO DEBE** usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender los advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnicos antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO substituye partes.

- Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferretería esta apretado.
- Se debe tener cuidado para asegurar que todos los ajustes de altura sean seguros.
- SIEMPRE observa la limitación de peso del usuario en el "hangtag" de este producto.
- Tenga cuidado cuando alcanzando por objetos cuando usando el andador. Alcanzando por objetos puede cambiar la distribución de peso en el andador y puede causar que el andador se dobla, resultando en herida o daño.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**  
[www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)

## ADVERTENCIAS DE INSTALACION

- GF Health Products Inc. no asume responsabilidad por dano o herida hecho por instalacion inapropiado, asamblea o uso de este producto.
- Examina el producto semanalmente o en ua rutina de mantenimiento preventativo para uso normal. Si algun componente no esta trabajando correctamente o se aparece usado, llame a su distribuidor de Lumex para reparacion y/o partes de reemplace apropiado.
- SIEMPRE trata de ver que el producto esta asegurado correctamente en la posicion abierto ANTES de uso y asegure que los tornios/hardware estan ajustados seguramente. El soporte de espalda debe SIEMPRE estar puesto y NO es disenio para soportar todo el peso del usuario.



## MANTENIMIENTO

- Pásale con una toalla húmedo albastón seminal.
- Agarres pueden ser limpiados con jabón o detergente suave.
- NO USE solvente orgánicos como acetona, que puede dañar el agarre.
- Nunca debe usar limpiadores abrasivos o estropajos en cual quiera parte del bastón.
- Cheque la cerradura seminal para rigidez.
- Reemplace la punta si es necesario.
- Para garantizar el servicio mejor de su producto, siempre especifica partes de reemplazo de Lumex, disponible de su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## INSTRUCCIONES PARA USO

*Lea y Entienda Todas Las Instrucciones Antes de Uso.*

Este bastón es diseñado para usuarios con alturas recomendados de 4' 10" a 6' 4". Por favor de consultar con un profesional de cuidado de salud para ajuste de altura y uso apropiado.

## AJUSTE DE ALTURA

1. Afloja la cerradura retorsando en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Ajuste la altura del bastón. Apreté el botón y deslice la sección inferior arriba y abajo a la altura deseado.

**NOTE:** Un "clic" audible se oye cuando el botón se sobresale seguramente por el hueco de ajustamiento.

3. Asegura la cerradura retorsando en el sentido de las agujas del reloj hasta que este ajustado.

## GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantía al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del product estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto pródigo a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la estructura tiene garantía por tres (3) anos y los componentes de uso normal como puntas, ruedas y manijas tienen garantía por tres (3) meses. El periodo de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

## OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTIA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando **(770) 368-4700**, mandando fax a **(770)-368-2386** o por email a **cs@grahamfield.com**. Direcciones específicos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

## EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF será responsable por lo siguiente: **1)** Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; **2)** Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y **3)** Cargos de Labor o transporte. Otras exclusiones se aplican. Limitaciones adicionales relativos a esta garantía pueden ser encontrados en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com) pagina de Acuerdos y Condiciones Leyes del Estado gobernando la garantía de este producto puede dar mas derechos que estan en esta garantía.

GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

## Features

- Offset handle places user's weight over the base for maximum balance and control
- Stability is enhanced with the low profile, 4-point base
- Easy height adjustment from 29" – 38" in 1" increments with locking mechanism for added security
- Strong and durable rounded base protects user's legs when walking
- 500 lb maximum weight capacity  
- EVENLY DISTRIBUTED

## Características

- Mango reclinada pone la mayoría del peso del usuario sobre la base para control y balanza máxima
- Estabilidad es aumentado con la base de 4 puntas poco destacado
- Ajustamiento de altura fácil de 29" – 38" en incrementos de 1" con mecanismo de cerradura para seguridad adicional
- Base redondo de acero cromado para proteger las piernas del usuario cuando este caminando
- Capacidad maximo de peso de 500 lb -  
DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE



For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

© 2009, GF Health Products, Inc.,  
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.  
Made in China. [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)